

Kinex ThermoComp™ Device

COMO PRENDER LA MAQUINA

Conecte la máquina en la pared y presione el interruptor (se encuentra detrás de la máquina) a la posición "ON" y espere hasta que el ventilador se prenda.

TERAPIA DE HIELO/COMPRESION

Empezar Terapia de Hielo

1. Oprime el botón COOL una vez
2. Oprime y detenga el botón COOL otra vez
3. Deje que circule por un minuto

Empezar Compresión

4. Oprime el botón COMP una vez
5. Oprime y detenga el botón COMP otra vez

Parar Terapia de Hielo

1. Oprime el botón COOL una vez
2. Oprime y detenga el botón COOL otra vez

Parar Compresión

3. Oprime el botón COMP una vez
4. Oprime y detenga el botón COMP otra vez


TERAPIA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP) PARA LA PANTORILLA O EL PIE

Empezar TVP

1. Oprime el botón CALF ó FOOT una vez
2. Oprime y detenga el botón CALF ó FOOT otra vez para escoger las dos piernas/la izquierda/la derecha , suelte el botón cuando ha escogido el que quiera

Para TVP

1. Oprime el botón CALF ó FOOT una vez
2. Oprime y detenga el botón CALF ó FOOT otra vez

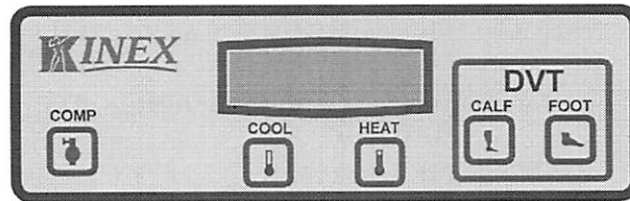

TERAPIA DE CALOR

Empezar Terapia de Calor

1. Oprime el botón HEAT una vez
2. Oprime y detenga el botón HEAT otra vez

Parar Terapia de Calor

1. Oprime el botón HEAT una vez
2. Oprime y detenga el botón HEAT otra vez

TERAPIA DE CONTRASTE

Empezar Terapia de Contraste

1. Oprime los botones COOL y HEAT al mismo tiempo una vez
2. Oprime y detenga los botones COOL y HEAT al mismo tiempo otra vez

Parar Terapia de Contraste

1. Oprime los botones COOL y HEAT al mismo tiempo una vez
2. Oprime y detenga los botones COOL y HEAT al mismo tiempo otra vez

TERAPIA DE CONTRASTE

Si la pantalla dice " CHECK FLOW/FLUID"

Inspeccione para pliegues ó arrugas en la envoltura. Ajuste y afloje la envoltura para disminuir cualquier obstrucción. Verifique que la máquina este corriendo en modo COOL con la compression apagada. Abra la tapa del depósito que se encuentra encima de la máquina. Inspeccione el nivel del líquido y si es necesario agregue líquido debajo del cuello de la máquina mientras que la máquina este corriendo. No llene de líquido hasta lo máximo. Cierre la tapa y continúe con terapia.

ADVERTENCIA

Terapia de Calor

No use terapia de calor al menos que este recetada por un medico.

Temperatura

No ajuste la temperatura

Distributed by:

KINEX
Phase I Rehab

ML 0134S